



Welch Allyn FlexiPort™

Wiederverwendbare Blutdruckmanschetten

Bei der Entwicklung dieser Manschette hatten wir das Wesentliche im Blick - Sie und Ihre Patienten

FlexiPort™

wiederverwendbare Manschetten

Die Standardisierung ist jetzt Realität.

Lange Lebensdauer, einfache Anwendung, günstiger Preis - basierend auf diesen Eigenschaften sind die Manschetten von Welch Allyn erste Wahl in Krankenhäusern auf der ganzen Welt. Welch Allyn kann fast jede Ausführung, jede Größe und jede Konfiguration von Manschetten anbieten und ermöglicht, wie kein anderer Manschettenlieferant, die Lagerhaltung zu vereinfachen. Dank des innovativen FlexiPort Anschlusses kann nun jede Manschette als Einschlauch- oder Zweischlauchmanschette verwendet werden.

- Der Manschettenwechsel erfolgt jetzt viel einfacher und schneller, da der Schlauch mit nur einer Hand auf den FlexiPort Anschluss gesteckt bzw. abgenommen werden kann.
- Getestet, um den Anforderungen im Klinikbetrieb gerecht zu werden
- 3 Jahre Garantie
- Erfüllt die neuen AAMI- und AHA-Richtlinien über die korrekte Größe von Blutdruckmanschetten
- Eine Standardisierung auf FlexiPort kann dazu führen, dass bis zu 60 % der Sachnummern für Manschetten entfallen



Die patentierte FlexiPort™ Technologie ermöglicht die Verwendung einer Manschette in fast allen Bereichen der Patientenversorgung.




Es gibt keine Nähte, die aufreißen oder ausfransen können.

Antimikrobielle Oberfläche vermindert Schimmelbildung und Bakterienwachstum.



Was ist FlexiPort?

FlexiPort ist die einzigartige Verbindungsstelle zwischen Blutdruckmessgeräten und Manschette, die es ermöglicht jede Manschette als Einschlauch- oder Zweischlauchmanschette zu nutzen.

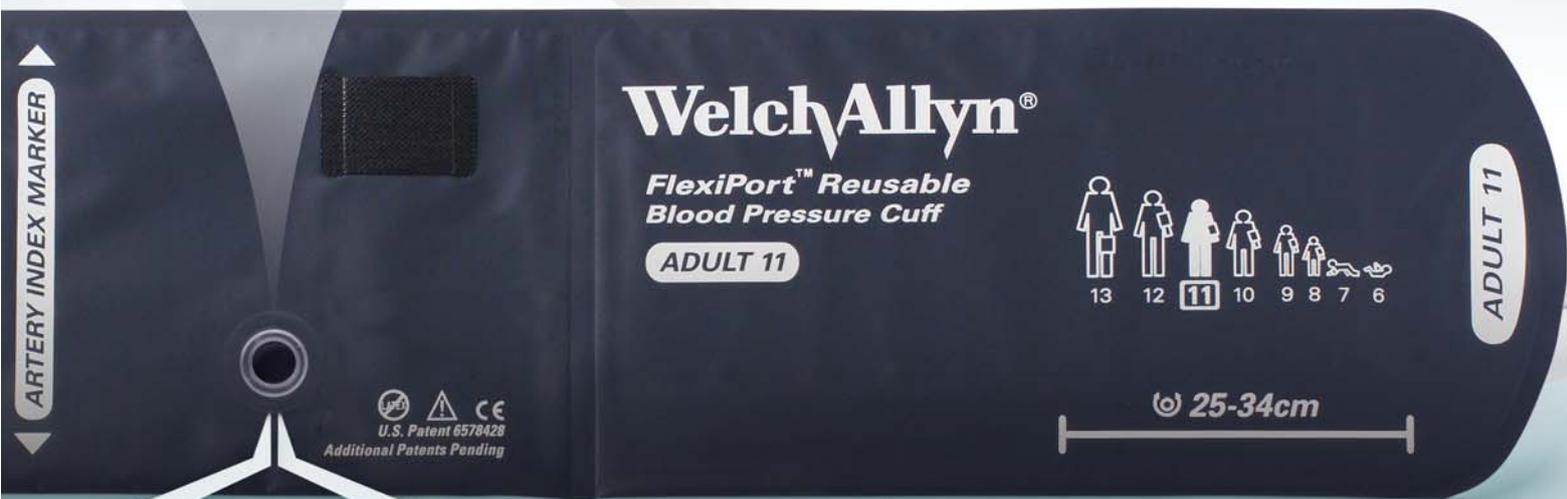

Der Anschluss ist drehbar, so dass der Druckschlauch und der Anschluss in der Manschette weniger strapaziert werden - dies bedeutet mehr Komfort für den Patienten und eine längere Lebensdauer für die Manschette



Die wichtigsten Manschettengrößen sind farb-codiert, um eine schnelle Zuordnung zu gewährleisten.

Latexfreies Material minimiert das Risiko allergischer Reaktionen.

Gefaltete Kanten verringern das Risiko von Hautreizungen und bieten mehr Komfort für den Patienten.

Die richtige Manschette. Die richtigen Schläuche. Zur richtigen Zeit.


Der einzigartige FlexiPort-Anschluss gewährleistet erstmalig eine echte Standardisierung der Manschetten in Ihrer gesamten Einrichtung. Mit Hilfe von FlexiPort werden lästige Zuordnungen von Schlauch- und Adaptersystemen vermieden, das Auffinden der korrekten Manschette ist nun so einfach wie nie zuvor.





Qualitativ hochwertige Velcro®-Verschlüsse

Auf der Manschette aufgedruckte Bestellnummer

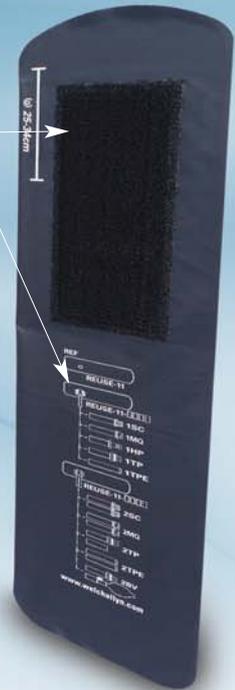

Vereinfachen Sie Ihren Lagerbestand durch Reduzierung der Sachnummern

Sobald die FlexiPort Anschlüsse an Ihren Blutdruckmessgeräten angebracht sind, brauchen Sie nur noch die Manschetten selbst zu bestellen – dies reduziert Ihren Lagerbestand um bis zu 60 %.

		Option 1	Option 2							
		Stecken sie den obigen FlexiPort Anschluss direkt auf den bestehenden Schlauch Ihres Blutdruckmessgerätes.	Kaufen Sie die FlexiPort-Manschetten mit Schläuchen und Anschlüssen passend zu Ihren Blutdruckmessgeräten ohne Umstellung.							
		Schläuche und zusätzliche Anschlüsse sind nicht nötig.	Einschlauch				Zweischlauch			
Größe	Armumfang	FlexiPort Manschette	Schraub- verbindung	Tri-Purpose	Rastverbindung	Bajonett- verbindung	Schraub- verbindung	Rastverbindung	Tri-Purpose für Zweischlauch- system	Gebläse
Kleinkind, klein (6)	7-10 cm	REUSE-06	REUSE-06-1SC	REUSE-06-1TPE	REUSE-06-1MQ	REUSE-06-1HP	n/a	n/a	n/a	n/a
Kleinkind (7)	9-13 cm	REUSE-07	REUSE-07-1SC	REUSE-07-1TPE	REUSE-07-1MQ	REUSE-07-1HP	REUSE-07-2SC	REUSE-07-2MQ	REUSE-07-2TPE	REUSE-07-2BV
Kind, klein (8)	12-16 cm	REUSE-08	REUSE-08-1SC	REUSE-08-1TPE	REUSE-08-1MQ	REUSE-08-1HP	REUSE-08-2SC	REUSE-08-2MQ	REUSE-08-2TPE	REUSE-08-2BV
Kind (9)	15-21 cm	REUSE-09	REUSE-09-1SC	REUSE-09-1TPE	REUSE-09-1MQ	REUSE-09-1HP	REUSE-09-2SC	REUSE-09-2MQ	REUSE-09-2TPE	REUSE-09-2BV
Erwachsener, klein (10)	20-26 cm	REUSE-10	REUSE-10-1SC	REUSE-10-1TPE	REUSE-10-1MQ	REUSE-10-1HP	REUSE-10-2SC	REUSE-10-2MQ	REUSE-10-2TPE	REUSE-10-2BV
Erwachsener (11)	25-34 cm	REUSE-11	REUSE-11-1SC	REUSE-11-1TPE	REUSE-11-1MQ	REUSE-11-1HP	REUSE-11-2SC	REUSE-11-2MQ	REUSE-11-2TPE	REUSE-11-2BV
Erwachsener, lang (11L)	25-34 cm	REUSE-11L	REUSE-11L-1SC	REUSE-11L-1TPE	REUSE-11L-1MQ	REUSE-11L-1HP	REUSE-11L-2SC	REUSE-11L-2MQ	REUSE-11L-2TPE	REUSE-11L-2BV
Erwachsener, groß (12)	32-43 cm	REUSE-12	REUSE-12-1SC	REUSE-12-1TPE	REUSE-12-1MQ	REUSE-12-1HP	REUSE-12-2SC	REUSE-12-2MQ	REUSE-12-2TPE	REUSE-12-2BV
Erwachsener, groß (lang) (12L)	32-43 cm	REUSE-12L	REUSE-12L-1SC	REUSE-12L-1TPE	REUSE-12L-1MQ	REUSE-12L-1HP	REUSE-12L-2SC	REUSE-12L-2MQ	REUSE-12L-2TPE	REUSE-12L-2BV
Oberschenkel (13)	40-55 cm	REUSE-13	REUSE-13-1SC	REUSE-13-1TPE	REUSE-13-1MQ	REUSE-13-1HP	REUSE-13-2SC	REUSE-13-2MQ	REUSE-13-2TPE	REUSE-13-2BV

* Für eine male und female Rastverbindung ändern Sie in der Art. Nr. "MQ" in „MF“

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Welch Allyn Vertriebspartner vor Ort oder besuchen Sie uns im Internet unter www.welchallyn.com.

Welch Allyn GmbH & Co. KG,
Zollerstrasse 2-4, D - 72417 Jungingen, Deutschland
Tel. 07477-9271-0 Fax. 07477-9271-90
info@welchallyn.de www.welchallyn.de

© 2007 Welch Allyn SM2976DE RevB

WelchAllyn
Advancing Frontline Care™